


Gebrauchsanleitung Sonnenbrillen




Information des Herstellers

Diese Sonnenbrille entspricht der Verordnung (EU) 2017/745. Für Europa gilt die Norm ISO 12312.1, in den USA nach dem nationalen Standard die Norm ANSI Z80.3. Die Konformitätserklärung ist unter <https://johann-v-goisern.com/documents/> verfügbar. Die verwendeten Brillengläser entsprechen der Filterkategorie 3. D.h., die Gläser sind dunkel getönt, geeignet für den Lichttransmissionsgrad 8-18% und weisen einen 100%igen UV-Schutz auf.

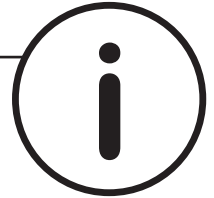


Verwendungsbereiche

Ihre Sonnenschutzbrille schützt gegen Blendung vor Sonnenlicht, gegen natürliche UV-Strahlung (100% UV-Schutz), bei Schnee, Regen und Wind. Nicht geeignet als Schutz vor Aufprall, harten Gegenständen, künstlichen Lichtquellen wie Lampen mit hoher Strahlungsenergie (UV-Lampen) und Solarien (Sonnenlampen). Für künstliche Lichtquellen benötigen Sie spezielle Schutzbrillen. Blicken Sie darüber hinaus mit dieser Sonnenbrille nicht direkt in die Sonne und beobachten Sie damit auch keine Sonnenfinsternis, weder mit noch ohne Sonnenbrille. Tragen Sie keine Sonnenbrille für Autofahrten bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen. Nehmen Sie Ihre Sonnenbrille ab, wenn der Lichteinfall zu niedrig ist, um gut zu sehen.

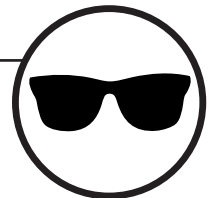

Lagerung und Transport

Die Sonnenbrille sollte bei einer Temperatur zwischen -10°C und +35°C in ihrem Etui aufbewahrt werden. Eine Aufbewahrung unter Sonneneinstrahlung in geschlossenen Räumen ohne Klimatisierung (z.B. Armaturenbrett im Auto) sollte vermieden werden, da die Temperaturen, die unter diesen Bedingungen erreicht werden, die Funktionstüchtigkeit der Fassung beeinträchtigen können (Verformung des Brillengestells).

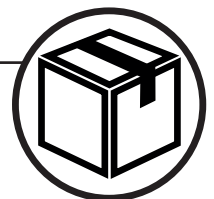

Gebrauchsanleitung Sonnenbrillen



Reinigung

Für eine optimale Funktion reinigen Sie ihre Brille regelmäßig mit klarem Wasser und einem weichen Tuch. Auch eine milde Seife, Geschirrspülmittel oder handelsübliche Brillenreinigungsmittel können verwendet werden. Bei Kontakt mit Reagenzien wie Salzwasser (Meerwasser), Schwimmbeckenwasser und chemischen Produkten (z.B. Kosmetika, Haarspray, Sonnencremes und Insektenschutzmitteln) wird eine sofortige Reinigung mit klarem Wasser und anschließendes Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen. Bei Verschleiß (z.B. Kratzer, Glanzverlust) wird der Austausch mit Originalersatzteilen empfohlen. Unsaubere Putztücher können die Filtereigenschaften beeinträchtigen.

Die Verwendung von Lösungsmitteln (z.B. Alkohol und Aceton) und aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die die Funktionstüchtigkeit der Brille beeinträchtigen könnte, sollte absolut vermieden werden.



Produktgarantie

Es gelten die nationalen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.



Kennzeichnung

Auf der Verpackung Ihres Produktes befindet sich, neben der Model- und Farbnummer auch eine UDI-PI (Unique Device Identification – Production Identifier) und eine UDI-DI (Unique Device Identification – Device Identifier) Nummer. Diese Nummern dienen zur Identifikation, Kennzeichnung und Registrierung von Medizinprodukten. Ziel ist es, die Patientensicherheit durch die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Produkten zu erhöhen.



Hersteller

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Austria
UID: ATU78604627
Firmenbuchnummer: 590054 b
ARA-Lizenznummer: 4826
Website: www.pomberger.com

Kontaktinformationen

Falls Ihr Fachoptiker, bei dem das Produkt erworben wurde, nicht kontaktiert werden kann, können Sie sich mit Reklamationen oder Fragen per Mail an office@pomberger.com oder telefonisch unter +43 (0) 6135 7465 bei uns melden.